
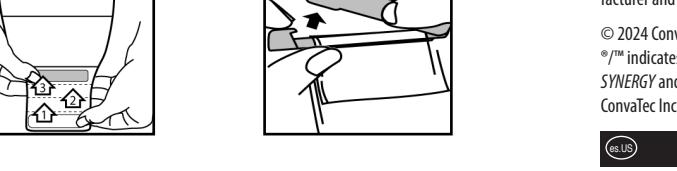
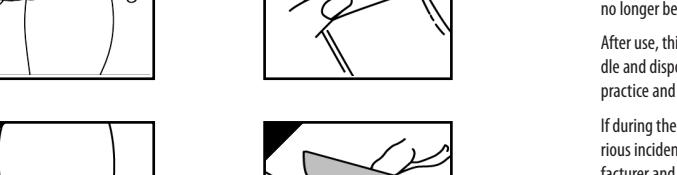
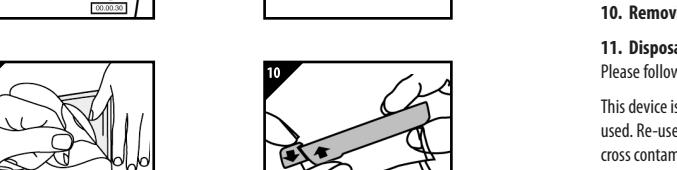
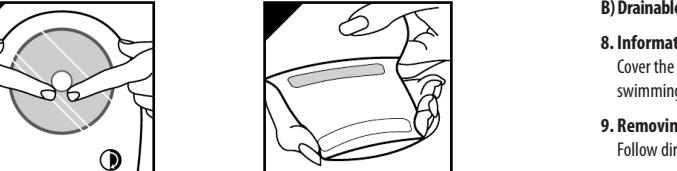
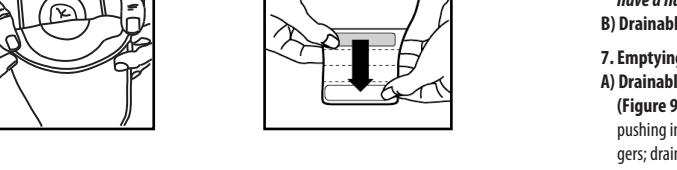
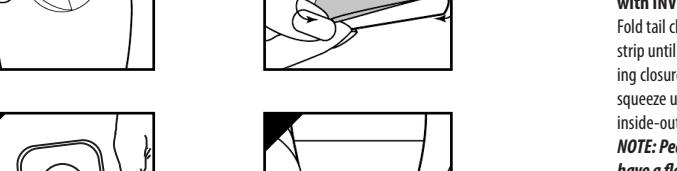
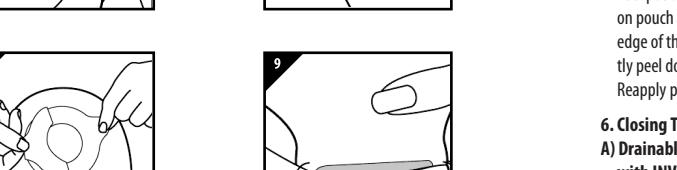
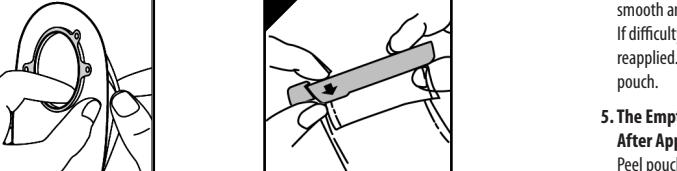
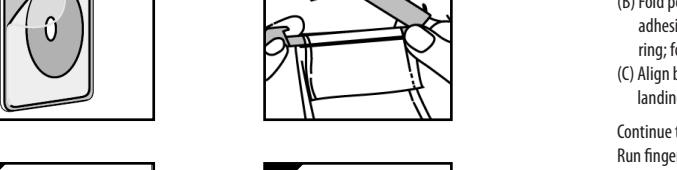
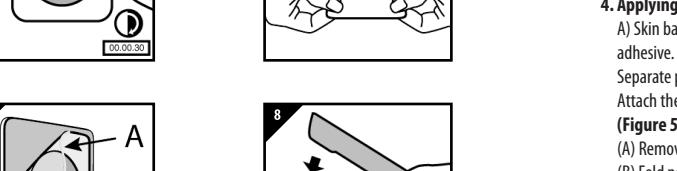
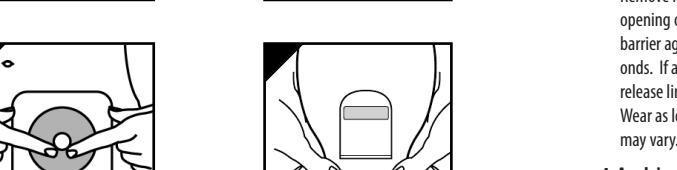
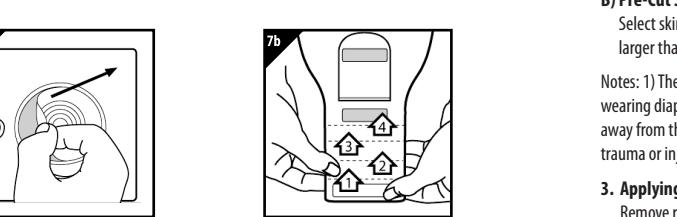
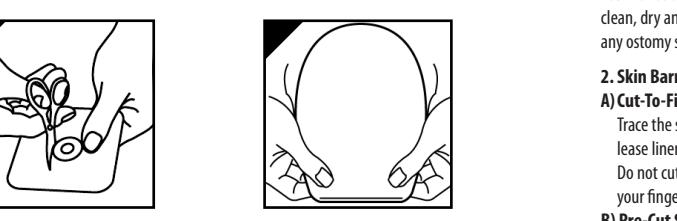


ESTEEMTM SYNERGY[™]

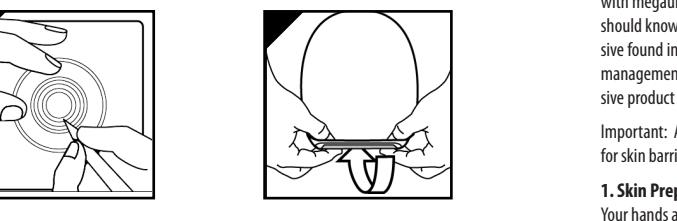

ENGLISH

Two-Piece Cut-to-Fit or Pre-Cut Ostomy System with ADHESIVE COUPLING TECHNOLOGY™

INSTRUCTIONS FOR USE
(Must be used with the same size ESTEEM SYNERGY™ pouch)

Intended Use: Management of stomal output.

Indications for Use: For use with a colostomy or ileostomy.

PRECAUTIONS AND OBSERVATIONS:

Caution: Patients with a flush ostomy, when associated with megaoesophagus and the absence of a urinary reservoir, should ensure that there have been reported cases of adhesive failure or dehiscence before applying ostomy products.

Important: A medical professional should assess the need for a skin barrier prior to use.

1. Skin Preparation

Your hands and the skin surrounding the stoma must be clean, dry and free from oily substances before applying an ostomy system.

2. Skin Barrier Preparation

A) Cut-to-Fit Skin Barrier (Figure 1)
Trace the shape of the stoma onto the skin barrier in a media line. Seal the skin barrier just outside the tracting area. Do not cut beyond last line. Smooth cutting open with your fingers.

B) Pre-cut Skin Barrier

Select skin barrier with pre-cut stoma opening slightly larger than your stoma.

Notes: (1) The stoma collar may cause skin irritation if worn during diapering. If irritation occurs, remove the collar away from the skin barrier. (2) Protect the stoma from trauma or injury.

3. Applying the Skin Barrier (Figure 2)

Remove release film from skin barrier. Center the opening of the skin barrier onto the stoma for 30 seconds. At the end of the 30 seconds, gently press the adhesive ring onto the skin barrier. Retain the etiquette adhesive during reapplication.

4. Insertion of the skin barrier (Figure 3)

With adhesive ring facing outwards, place the skin barrier onto the skin around the stoma for 30 seconds. At the end of the 30 seconds, gently press the adhesive ring onto the skin barrier. Retain the etiquette adhesive during reapplication.

5. Removal of the skin barrier (Figure 4)

With adhesive ring facing outwards, gently pull the skin barrier away from the stoma. Remove the adhesive ring.

6. Cleaning the pouch (Figure 5)

Fold pouch closure beginning with the white outer edge strip until interlocking closure opens. Press interlocking closure together across the width of the stoma. Open the pouch.

7. Preparing the pouch (Figure 6)

Separate pouch film to allow air to enter. (Figure 4) Attach the matching pouch to skin barrier as follows:

(Figure 5)

(A) Remove release liner from pouch adhesive ring. (B) Fold pouch adhesive ring in half without touching adhesive ring. Place pouch adhesive ring onto the adhesive ring.

8. Insertion of the protector (Figure 7)

With adhesive ring facing outwards, place the pouch onto the skin barrier. Retain the etiquette adhesive during reapplication.

9. Removal of the pouch (Figure 8)

With adhesive ring facing outwards, gently pull the pouch away from the skin barrier.

10. Cleaning the pouch (Figure 9)

With adhesive ring facing outwards, gently pull the pouch away from the skin barrier.

11. Disposal

Please follow all local disposal regulations.

This device is for single-use only and should not be reused. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimal for intended use.

After use, this product may be a potential biohazard, handle and dispose in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations.

If the use of this device or a result of its use has caused an incident, please report it to the manufacturer and to your national authority.

© 2024 ConvaTec Inc.
*™ indicates trademarks of Convatec Inc. ESTEEM SYNERGY and INVISCLOSE are registered trademarks of Convatec Inc. in the United States.

CANADIEN-FRANÇAIS

Appareil pour stomie à deux pièces, à décorner par une mesure ou préédéposé, avec technologie de couplage adhésif ADHESIVE COUPLING TECHNOLOGY™

MODE D'EMPLOI
(Doit être utilisé avec un sac ESTEEM SYNERGY™ de même dimension)

5. The Empty Pouch Can Be Repositioned After Application (Figure 6)

Pleuvez pocher avec l'adhesive ring de la tab de bord pour éliminer les effluves de la poche. Verifiez que l'adhesive ring est bien placé sur la peau.

6. Closing The Pouch With Adhesive Collar (Figure 7)

Pliez le collier d'adhésif et poussez-le vers l'ouverture de la poche. Fermez la fermeture à glissière jusqu'à ce qu'il soit fermement serré.

7. Emptying The Pouch

With adhesive ring facing outwards, gently pull the pouch away from the skin barrier.

8. Information About Pouches With Filters

Filterez l'urine avec le filtre fourni lorsque vous pratiquez l'hydrothérapie ou nagez.

9. Removing The Pouch

Follow directions in Section 5.

10. Removing The Skin Barrier (Figure 11)

With adhesive ring facing outwards, gently pull the pouch away from the skin barrier.

11. Disposal

Please follow all local disposal regulations.

This device is for single-use only and should not be reused. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimal for intended use.

After use, this product may be a potential biohazard, handle and dispose in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations.

If the use of this device or a result of its use has caused an incident, please report it to the manufacturer and to your national authority.

© 2024 ConvaTec Inc.
*™ indicates trademarks of Convatec Inc. ESTEEM SYNERGY and INVISCLOSE are registered trademarks of Convatec Inc. in the United States.

US ESPAÑOL

Sistema de estoma de dos piezas recortable o pre-cortado con ADHESIVE COUPLING TECHNOLOGY™

INSTRUCCIONES DE USO
(Se utiliza con la bolsa ESTEEM SYNERGY™ de la misma medida)

1. Preparación de la piel

Selecione un protector de la piel con el diseño que prefiera. Coloque el protector de la piel por fuera del trazo marcado. No recorte por fuera de la última linea. Solo la abertura de la piel debe corresponder al diseño de la sección 4.

2. Preparación del protector de la piel

Manje el contorno del estoma en los límites del protector, intente proteger el protector de la piel por fuera de la última linea. Solo la abertura de la piel debe corresponder al diseño de la sección 4.

3. Aplicación del protector de la piel (Figure 3)

Coloque el protector de la piel para que pueda ser aplicado con un movimiento fluido y sencillo.

4. Aplicación de la bolsa

Aplicación de la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

5. Preparación de la bolsa con el diseño que prefiera (Figure 4)

Abra la bolsa y quite la etiqueta adhesiva de la parte de la abertura de la piel.

6. Aplicación de la bolsa

Aplicación de la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

7. Cierre de la bolsa

Cierre la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

8. Desechamiento de la bolsa

Quite la bolsa y deseche de acuerdo con las normas de desechamiento de residuos.

9. Limpieza del dispositivo

Limpie el dispositivo con agua y jabón.

10. Reciclaje de la bolsa

Recicle la bolsa con el diseño que prefiera.

11. Descripción

Por favor siga las instrucciones de la sección 4.

12. Preparación de la piel

Selecione un protector de la piel con el diseño que prefiera. Coloque el protector de la piel por fuera del trazo marcado. No recorte por fuera de la última linea.

13. Aplicación de la bolsa

Aplicación de la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

14. Cierre de la bolsa

Cierre la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

15. Desechamiento de la bolsa

Quite la bolsa y deseche de acuerdo con las normas de desechamiento de residuos.

16. Limpieza del dispositivo

Limpie el dispositivo con agua y jabón.

17. Reciclaje de la bolsa

Recicle la bolsa con el diseño que prefiera.

18. Descripción

Por favor siga las instrucciones de la sección 4.

19. Preparación de la piel

Selecione un protector de la piel con el diseño que prefiera. Coloque el protector de la piel por fuera del trazo marcado. No recorte por fuera de la última linea.

20. Aplicación de la bolsa

Aplicación de la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

21. Cierre de la bolsa

Cierre la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

22. Desechamiento de la bolsa

Quite la bolsa y deseche de acuerdo con las normas de desechamiento de residuos.

23. Limpieza del dispositivo

Limpie el dispositivo con agua y jabón.

24. Reciclaje de la bolsa

Recicle la bolsa con el diseño que prefiera.

25. Descripción

Por favor siga las instrucciones de la sección 4.

26. Preparación de la piel

Selecione un protector de la piel con el diseño que prefiera. Coloque el protector de la piel por fuera del trazo marcado. No recorte por fuera de la última linea.

27. Aplicación de la bolsa

Aplicación de la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

28. Cierre de la bolsa

Cierre la bolsa con el diseño que prefiera. Coloque la bolsa con la abertura de la piel de la misma medida que la abertura de la piel del protector de la piel.

29. Desechamiento de la bolsa

Quite la bolsa y deseche de acuerdo con las normas de desechamiento de residuos.</

